

製品仕様・使用条件

	SIXPAD Abs Fit (シックスパッド アブズフィット)	SIXPAD Body Fit (シックスパッド ボディフィット)
品番	SP-AF2009F TR-AM2015A-E	SP-BF2008F TR-AM2015B-E
重量	約84g(コイン電池含む)	約49g(コイン電池含む)
サイズ	約173 mm×198 mm	約112 mm×244 mm
電池の種類	コイン形リチウム電池 CR2032	
推奨使用環境温度	約15～35℃	
材質	本体表：シリコンゴム 本体裏：PET 電極部：導電性銀・カーボンインク 電池カバー：ABS 台紙：PET、PP、紙 クリアケース：PVC オープナー：POM サポートベルト：<表側>ナイロン 86%、ポリウレタン 14% <裏側>ポリエステル 100% <パイピング>ポリエステル 80%、ポリウレタン 20%	
付属品	取扱説明書、ジェルシート、お試し電池(CR2032)、台紙、クリアケース、 オープナー、サポートベルト	
製造元	株式会社MTG (日本)	原産国：中国

	SIXPAD Abs Fit Gel Sheet (シックスパッド専用 アブズフィット 高電導ジェルシート)	SIXPAD Body Fit Gel Sheet (シックスパッド専用 ボディフィット 高電導ジェルシート)
重量	6枚 約21g (1枚 約3.5g)	2枚 約12g (1枚 約6g)
サイズ	ジェルシートのみ： 約64 mm×37 mm 保護シート有り： 約68 mm×43 mm	ジェルシートのみ： 約90 mm×52 mm 保護シート有り： 約95 mm×57 mm
材質	アクリル系ポリマー	
製造元	株式会社MTG (日本) ジェルシート原材料：日本 製造・加工：中国	

本品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

⚠ 危険

次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。
事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。



- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計などの装着型医用電気機器

⚠ 警告

次のような方は使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。



- ・心臓疾患のある方
- ・妊娠中の方、出産直後の方

次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。



- ・アレルギー体質の方
- ・皮膚に知覚障害や異常(感染症、皮膚炎や傷など)のある方
- ・血行障害のある方
- ・薬を服用中の方
- ・悪性腫瘍のある方
- ・脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
- ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- ・発熱(38℃以上)している方
- ・安静を必要とする方
- ・脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患のある方
- ・骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- ・血圧に異常がある方
- ・ジェルシートが肌に合わない方
- ・特に身体に異常を感じている方
- ・その他医療機関で治療中の方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

⚠ 警告

次のような部位には使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。



- ・胸部および肩甲骨などの心臓の周辺部位や首から上の部位(頭、顔など)
- ・傷口や目、口、陰部などの粘膜部位
- ・当日、脱毛処理をした部位
- ・整形手術をした部位
- ・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位
- ・背骨(脊椎)
- ・刺青(タトゥー)を入れている部位
- ・生理中の腹部

本書で指定している部位以外には使用しないでください。



- ・小さなお子様、ご自分で取扱説明書の内容を理解できない方は使用しないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。
- ・コイン電池や電池カバーをお子様の手の届くところに置かないでください。誤飲のおそれがあります。万が一、飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。
- ・分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
- ・落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガのおそれがあります。
- ・電極部に金属を接触させないでください。感電のおそれがあります。
- ・他の電気製品・美容機器などとは併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこすおそれがあります。

⚠ 注意

次の注意事項を守って、使用してください。
事故やケガ、感電、破損、汚れなどのおそれがあります。



- ・本体やジェルシートを電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないでください。
- ・用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。
- ・小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。
- ・本体に液体をこぼさないでください。
- ・運動中や自動車などの運転中は使用しないでください。
- ・浴室など湿度の高いところでは使用しないでください。

⚠ 注意



- ・使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症状の悪化につながるおそれがあります。
- ・本品から異臭、異音がする場合、または内部に水などの異物が入り込んだ場合は、ただちに電源を切り、コイン電池を取り外してください。ショートや故障、発火のおそれがあります。
- ・ジェルシートは他の人と共有しないでください。感染症のおそれがあります。

コイン電池を取り扱うときは、次のことを守ってください。
ケガや故障、事故のおそれがあります。



- ・コイン電池が液漏れしたときは、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または(株)MTG お客様相談室に点検を依頼してください。
- ・コイン電池の液体が目に入った場合は、失明など障害を起こすおそれがあります。こすらずただちにきれいな水で1分以上十分に洗ったあと、医師に相談してください。
- ・コイン電池の液体が皮ふや衣服に付着した場合は、皮ふに障害を起こすおそれがあります。ただちに多量のきれいな水で洗い流してください。
- ・コイン電池を取り付けるときは、裏・表を間違えないように取り付けてください。
- ・使い切ったコイン電池はただちに本品から取り出してください。
- ・電池カバーを外すときは付属のオープナーを使ってください。爪などを使うと、ケガをするおそれがあります。

ジェルシートを取り扱うときは、次のことを守ってください。
痛みややけどのおそれがあります。




- ・破損や劣化、汚れたジェルシートは使用しないでください。
- ・ジェルシートは曲げたり折ったりしないでください。ジェルシートが破損します。
- ・ジェルシートは皮ふに密着させてください。貼った部分に隙間があると、ジェルシート全面で電気が均一に流れないため、刺激を強く感じる場合があります。
- ・ジェルシートを取り外すときは本品の電源を切ってください。
- ・必ず電極部にジェルシートを貼って使用してください。電源が入っているときは、電極部を直接触らないでください。


各部の名称・付属品

Abs Fit アブズフィット

■本体【表】

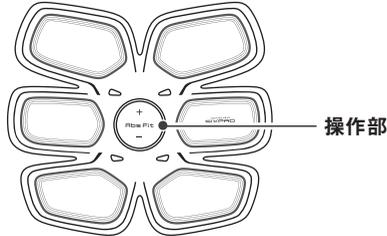

■本体【裏】

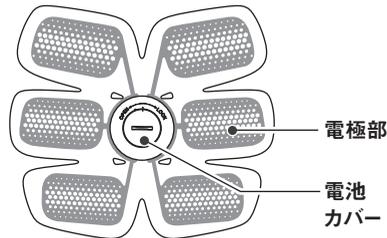


付属品

- ・取扱説明書(本書) ……1冊
- ・台紙…1枚
- ・クリアケース…1枚
- ・コイン形リチウム電池CR2032(お試用) ……2個
- ・アブズフィット高電導ジェルシート[※]…6枚
- ・オープナー…1個
- ・サポートベルト…1本


※消耗品です。粘着面(ジェル面)が傷んだときは、別売品をお求めください。
詳しくは、P.22「別売品」を参照してください。

Body Fit ボディフィット

■本体【表】

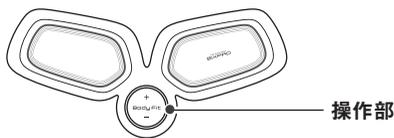

■本体【裏】

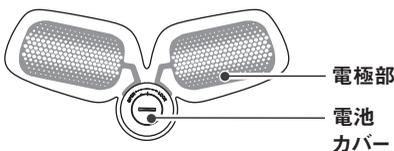


付属品

- ・取扱説明書(本書) ……1冊
- ・台紙…1枚
- ・クリアケース…1枚
- ・コイン形リチウム電池CR2032(お試用) ……2個
- ・ボディフィット高電導ジェルシート[※]…2枚
- ・オープナー…1個
- ・サポートベルト…1本

※消耗品です。粘着面(ジェル面)が傷んだときは、別売品をお求めください。
詳しくは、P.22「別売品」を参照してください。

操作部の拡大図

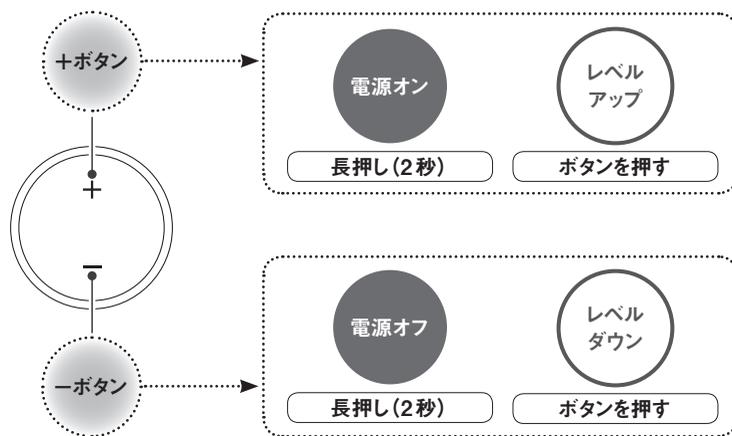

使用上のご注意

本品をご使用の際は下記の内容をよくお読みください。



- ・使用する部位に本体を貼り付けてから、電源を入れてください。使用後は、必ず電源を切ってから本体を身体から剥がしてください。強いショックを受けるおそれがあります。
- ・身体や肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となるおそれがあります。
- ・むやみに強くしたり、長時間使用すると、筋肉疲労や、皮ふのヒリヒリ感、赤みの原因となるおそれがあります。
- ・本品を使用するときは、アクセサリ類(ネックレス、ピアス、ベルトなど)を外してください。事故やケガ、破損などのおそれがあります。
- ・使用中に電子機器(腕時計、歩数計、携帯電話など)を本体に近付けないでください。電子機器が誤作動するおそれがあります。

- ・使用の際は、化粧水やボディクリームなどを使用しないでください。粘着が弱くなるおそれがあります。
- ・ご使用箇所の体毛は処理されていたほうが、ジェルシートがより良く肌に密着します。ただし、脱毛当日の使用はお控えください。
- ・変形などのおそれがあるため、冷やしたり、温めたりした状態で使用しないでください。また、熱湯をかけたり、サウナで使用したりなど本品に急激な温度変化を与えるような使用はしないでください。
- ・使用する部位は清潔にしてください。
- ・本品は防水仕様ではありません。水のかかる場所や湿度の高い場所では使用しないでください。


電池の取り付け方法




- ・コイン電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。
- ・コイン電池を取り付ける際は、「+」「-」極を正しく取り付けてください。
- ・長期間使用しないときは、コイン電池を取り外してください。
- ・必ず使用推奨期限内のコイン電池を使用してください。
- ・コイン電池を水に濡らしたり、濡れた手で触れたりしないでください。

- ・コイン形リチウム電池 CR2032 を使用してください。
- ・お買い上げ時の付属コイン電池はお試用のため、通常より消耗が早い場合があります。
- ・室温が低いとき、コイン電池の寿命が短くなる場合があります。
- ・コイン電池の電池残量が減ってくると、電気刺激が弱くなります。そのまま使用していると、「ピッ、ピッ」と警告音が鳴り、約2分続くと自動的に電源が切れます。新しいコイン電池に交換してください。
- ・電池カバーを強く回すと、電池カバーが破損するおそれがあります。

- 1 付属のオープナーを電池カバーの溝に当て、「OPEN」方向に回します。

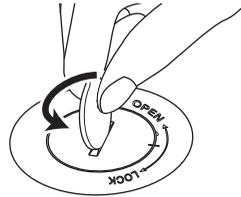


- 2 オープナーのツメを使って、電池カバーを開けます。

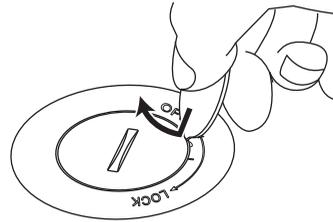


- 3 コイン電池の⊕マークが見える向きに電池を入れます。

- ・コイン電池の向きに注意してください。

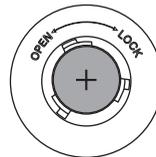

- 4 電池カバーをかぶせ、付属のオープナーを使って、「LOCK」方向に閉めます。

- ・本体と電池カバーの電池合わせマークが重なるようにしてください。

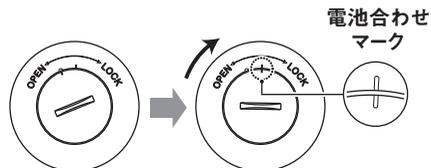

ジェルシートの取り扱い方法

ジェルシートは消耗品です。次のようなときは新品と交換してください。

- ・開封後1ヶ月を過ぎたとき、またはご使用回数(肌への着脱)が30回程度になったとき
- ・粘着力の低下、粘着面(ジェル面)の乾燥・えぐれや取り除けない汚れなどが生じたとき

ジェルシートを取り扱うときは、次のことに注意してください。

- ・直射日光・高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。
- ・ジェルシートを放置したり、汚れが付着したものと一緒に保管したりしないでください。ジェルシートが汚れて、粘着力や電気刺激が低下したり、痛みややけどをおこしたりするおそれがあります。
- ・お手入れの頻度や肌の状態、保管状態などによっては、ジェルシートが15～25回で剥がれやすくなる場合がありますがお手入れすることで長持ちします。詳しくは、P.16「お手入れ方法」を参照してください。
- ・誤って衣服などに貼り付いて剥がれないときは、無理に剥がさず、ジェルシートが貼り付いた衣服の裏側からわずかな水で湿らせると、簡単に剥がれます。

ジェルシートの貼り付け方法



- ・破損や劣化、汚れたジェルシートは使用しないでください。やけどのおそれがあります。
- ・必ず全ての電極部にジェルシートを貼り付けてください。電極部が肌に当たると、痛みややけどのおそれがあります。


ポイント!

- ・「Abs Fit」と「Body Fit」のジェルシートの貼り付け方法は同じです。
- ・間違った方法で貼り付けると、肌への粘着が弱くなり、正常に機能しなかったり、使用目安よりも早く消耗する可能性があります。

1 ジェルシートを袋から取り出します。

2 ジェルシートに付いてるフィルム(オレンジ色)を剥がします。


- ・フィルム(透明)は身体に貼り付ける側です。向きを間違えないでください。

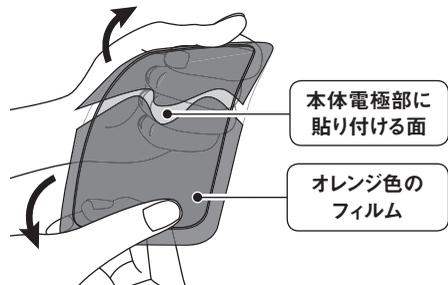

ジェルシートの取り扱い方法

3 本体の電極部(グレー)に貼ります。

- ・ 空気が入らないように貼ってください。透明フィルムの上から、ジェルシートを指の腹で押して、空気を抜いてください。

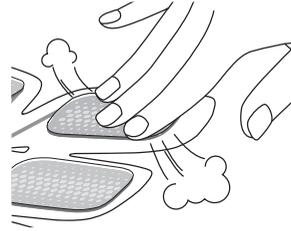


ジェルシートの貼る位置は次のとおりです。

Abs Fit

Body Fit

ポイント!

アブズフィット
高電導
ジェルシート
6枚

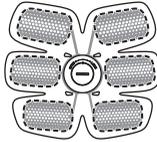


ボディフィット
高電導
ジェルシート
2枚

必ず「Abs Fit」「Body Fit」専用のジェルシートを使用してください。

4 本体にジェルシートをきちんと貼り付けた後、フィルム(透明)を剥がします。

- ・ 電極部に貼ったジェルシートは新品と交換するときまで、剥がさないでください。

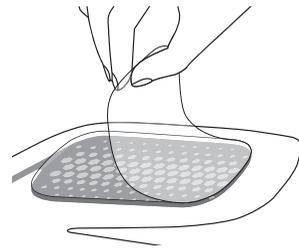

ジェルシートの取り外し方法

1 めくるようにゆっくりとジェルシートを剥がします。

- ・ 電極部に残ったジェルは全て取り除いてください(剥がしたジェルシートを、残ったジェルのかげらに付着させると、簡単に取り除けます)。



ジェルシートを取り外すときは本品の電源を切ってください。痛みややけどのおそれがあります。



基本のご使用方法

ご使用の目安は下記のとおりです。

ポイント!

- ・使用箇所は1箇所につき、1日1回までとしてください。
- ・新品のコイン電池を使用した場合は、レベル8で約30回使用できます（室温20℃のとき）。
 - ・レベルを下げれば、電池寿命は長くなります。レベルを上げれば、電池寿命は短くなります。
 - ・低温下では、電池性能が低下し、使用目安回数より少なくなります。

1 本体を使用部位に貼り付けます。

ポイント!


- ・使用したい部位の汗を拭き取ってから貼り付けてください。
- ・粘着面(ジェル面)はなるべく指で触らないでください。
- ・ジェルシートは皮ふに密着させてください。貼った部分に隙間があると、ジェルシート全面で電気が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じることがあります。



Abs Fit

お腹

肋骨の下と腰骨の間に本体を貼り付けます。

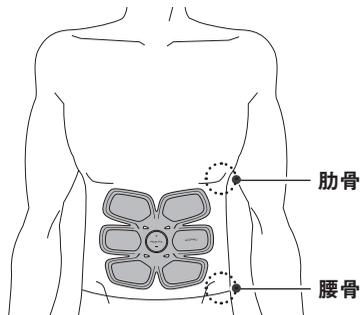


刺激を感じにくい場合は、本体を貼る位置を1～2センチずつ上下に移動させてください。
貼る位置を変える場合は、電源を切ってください。



Body Fit

ウエスト

操作部を下に向け、ウエスト(わき腹)をはさみ込むように本体を貼り付けます。

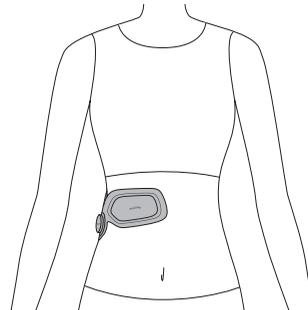


基本的なご使用方法



Body Fit

二の腕

操作部を下に向け、二の腕の内側をはさみ込むように本体を貼り付けます。

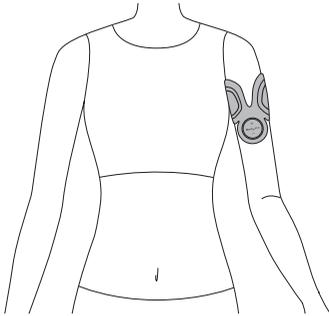

ポイント!

・二の腕は、比較的弱いレベルでもトレーニングすることができます。レベルを上げすぎないで使用してください。




Body Fit


太もも

操作部を下に向け、太もも(表側・内側)をはさみ込むように本体を貼り付けます。

表側

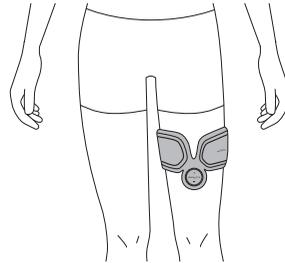


内側

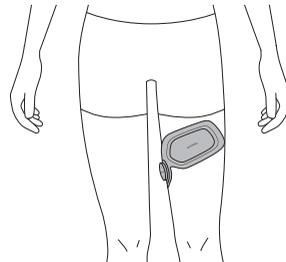

2 電源を入れます。

ポイント!

・電源が入っている状態でジェルシートが肌に密着していないと、「ピッ、ピッ」と警告音が鳴ります。そのままの状態が約2分続くと、自動的に電源が切れます。

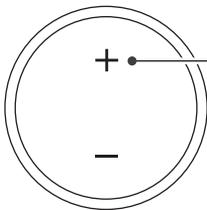

+ボタン

電源オン

長押し(2秒)

「ピー」という音が鳴り、電源が入ります。


刺激の強さの初期設定はレベル0(刺激なし)です。電源が入っても刺激は始まりません。

基本的なご使用方法

3 レベルを調節します。


ポイント!

- ・ 刺激のレベルは全部で15段階(レベル1～15)あります。
- ・ 初めてお使いになるときは弱いレベルに設定して使用してください。弱いレベルに慣れましたら、レベルの調節を行ってください。
- ・ コイン電池の電池残量が減ってくると、電気刺激が弱くなります。そのまま使用していると、「ピッ、ピッ」と警告音が鳴り、約2分続くと自動的に電源が切れます。新しいコイン電池に交換してください。

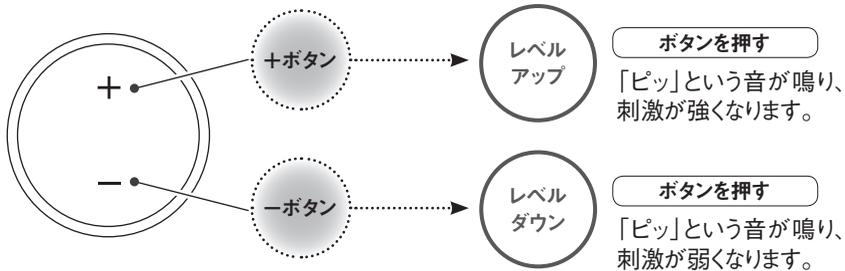

トレーニング プログラム

- ・ 効率的なトレーニングのために、体感が自動的に切り替わります。
- ・ 開始から終了まで、約23分です。

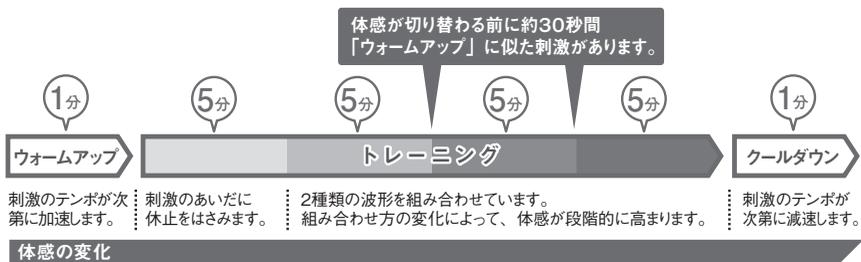


基本的なご使用方法

4 電源を切ります。

約23分後に自動的に電源が切れます。

途中で電源を切る場合

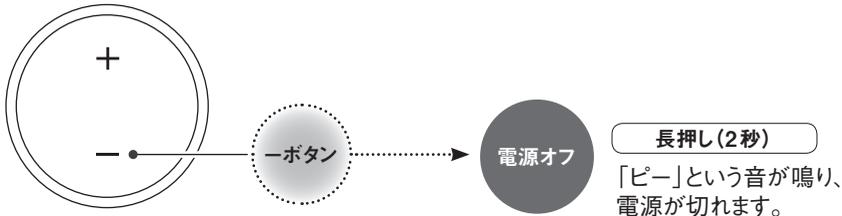


5 本体を身体から剥がします。

- ・必ず電源を切ってから、本体を身体から剥がしてください。
- ・粘着面(ジェル面)はなるべく指で触らないでください。
- ・使用後は毎回、台紙に貼り付け、クリアケースに入れてください。ジェルシートにほこりなどが付着すると、粘着力や電気刺激が低下したり、痛みややけどをおこしたりするおそれがあります。詳しくはP.15「保管方法」を参照してください。
- ・肌にジェルのかけらが残った場合はきれいに取り除いてください。身体に貼り付けたままにしていると、肌荒れのおそれがあります。


正しい剥がし方

図のように本体全体を持つようにしてゆっくりと剥がしてください。

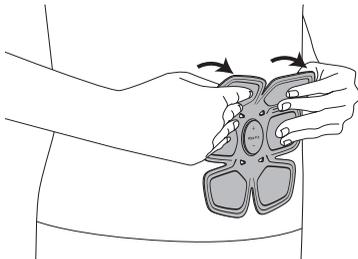

誤った剥がし方


本体を無理に引っ張ったり、一部だけを持って剥がそうとしたりしないでください。本体が破損するおそれがあります。

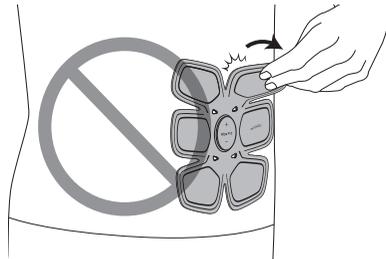

保管方法

1 台紙に貼ります。

- ・本体を折り曲げるなどして、ジェルシート同士を接触させないでください。
- ・台紙に強く押し付けしないでください。粘着面(ジェル面)が傷むおそれがあります。

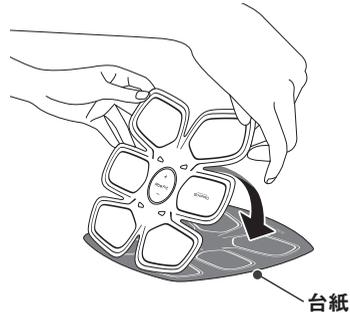

2 クリアケースに入れます。

Abs Fit



Body Fit



ポイント!

- ・台紙・クリアケースは清潔に保ってください。
- ・高温・多湿の場所(車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- ・湿気の少ないところに保管してください。
浴室内などに放置すると本体内部で結露やサビが発生する原因になります。
- ・使用しない時は、つまずいてケガをしないよう、安全な場所で保管してください。
- ・小さなお子様の手の届くところやペットの近くに保管しないでください。
- ・火気の近くで保管しないでください。
- ・長期間(1か月以上)使用しない場合は、必ず本体からコイン電池を取り外してください。コイン電池の消耗や液漏れのおそれがあります。

廃棄方法

- ・各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。
- ・長期使用にともない、本体に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して廃棄してください。

お手入れ方法



お手入れは、電源が切れていることを確認してから行ってください。電源が入ったままお手入れをすると、刺激などを受ける場合があります。

ポイント!

- ・本体は水洗いしないでください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。
- ・ジェルシートは必ず清潔な手で取り扱ってください。


本体のお手入れ方法

- ①本体が傷付かないよう柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取ってください。
- ②汚れた場合はぬるま湯で3～5%に希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よく絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。
- ③水で濡らした布をよく絞り、洗剤を拭き取ってください。
- ④風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

ジェルシートのお手入れ方法

ジェルシートの粘着面(ジェル面)が汚れて貼りつきにくくなったら、下記の手順でお手入れしてください。

- ①指先に水滴をつけてジェルシートの粘着面(ジェル面)をこすり、汚れを取り除いてください。
- ②十分に水をきって、粘着面(ジェル面)を上にし、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- ③表面の水気がなくなるまで自然乾燥させてから、本体を台紙に貼り付けてください。

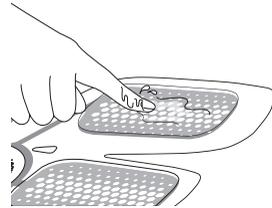

ポイント!

- ・長時間、頻繁にお手入れをしないでください。粘着面(ジェル面)が傷んで、寿命が短くなるおそれがあります。

Q & A

Q1 毎日使用しても大丈夫ですか？

A1 毎日ご使用できます。ただし、1箇所につき、1日1回までとしてください。同じ箇所への繰り返しの使用は筋肉疲労を起こすおそれがあるため、お控えください。また、身体や肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。

Q2 浴室で使用してもよいですか？

A2 本体は防水使用ではありません。
浴室での使用は事故やケガ、破損、汚れなどのおそれがありますのでお控えください。

Q3 お手入れはどうするのですか？

A3 本体表面の汚れに関しては、乾いた布で拭き取ってください。ジェルシートのお手入れ方法に関して詳しくは、P.16「お手入れ方法」を参照してください。

Q4 どのレベルを使えばよいですか？

A4 初めてお使いになるときは弱いレベルに設定して使用してください。弱いレベルに慣れましたら、レベルの調節を行ってください。

Q5 化粧水やボディークリームなどを塗ってから使用してもよいですか？

A5 ジェルシートの粘着力が低下し、体感が弱くなる可能性がありますので、肌には何も塗らない状態で使用してください。

Q6 使用できない部位や、使用できない場合はありますか？

A6 首から上の部位（頭、顔など）、背骨（脊髄）、胸部および肩甲骨などの心臓周辺部位には使用しないでください。また、心臓に疾患がある場合は使用しないでください。詳しくは、P.2「安全のご注意」を参照してください。

Q & A

Q7 妊娠中や出産直後に使用してもよいですか？

A7 使用しないでください。産後・授乳中の方は、かかりつけの医師にご相談ください。

Q8 コイン電池の消耗が激しい気がする

A8 新品のコイン電池を使用した場合は、レベル8で約30回使用できます（室温20℃のとき）。ただし、コイン電池の寿命は、使用環境、保管環境などにより大きく変化します。付属コイン電池はお試し用です。コイン電池を交換する場合、新品のコイン型リチウム電池 CR2032 を使用してください。

Q9 睡眠中に使用できますか？

A9 睡眠中は使用しないでください。

Q10 本品を使用して筋肉に痛みは生じるものですか？

A10 他のトレーニングと同じで、筋肉痛が生じる可能性があります。筋肉痛がある場合は、使用をお控えいただくか、レベルを下げて使用してください。

Q11 ジェルシートの交換時期はいつですか？

A11 使用環境にもよりますが、ご使用回数（肌への着脱）が30回程度になりましたら、新しいジェルシートに交換してください。また、ジェルシートの一部が剥がれたり、まるまったりした場合や、粘着力が以前より弱くなっていると感じた場合でも、新しいジェルシートに交換してください。

Q12 電極部が黒くなってきましたが、支障はありませんか？

A12 支障はありません。使用回数や使用状況により電極部が黒く変色することがあります。これは電極材質の変色によるものです。カビや汚れのような不衛生なものではなく、また、本品の性能を劣化させるものではありません。

故障かな?と思ったら

状態	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	コイン電池が入っていない。	新品のコイン電池を本体にセットする。
	コイン電池が逆に取り付けられている。	コイン電池の⊕マークが上に見える向きにコイン電池を入れる。
	コイン電池が消耗している。	新品のコイン電池に交換する。
	中古のコイン電池を使用している。	
	指定外のコイン電池を使用している。	コイン形リチウム電池CR2032を使用する。
	操作部を押す時間が短い。	「ピー」の音が鳴るまで、+ボタンを長押し(2秒)する。
	低温・高温の環境下で使用した。	推奨使用環境温度(15～35℃)で使用する。
「ピッ、ピッ」という音が鳴り止まない	ジェルシートが肌に密着していない。	全てのジェルシートを肌に密着させる。 ^{*1}
	コイン電池の電池残量が少なくなっている。	新品のコイン電池に交換する。
電気刺激を感じない	電源が入っていない。	「ピー」の音が鳴るまで、+ボタンを長押し(2秒)する。
	ジェルシートが肌に密着していない。	全てのジェルシートを肌に密着させる。 ^{*1}
	ジェルシートの粘着面(ジェル面)が傷んでいる。	P.9「ジェルシートの取り扱い方法」を参照して、新しいジェルシートに交換する。 ^{*2}
	ジェルシートの粘着面(ジェル面)がゴミやホコリなどで汚れている。	P.16「ジェルシートのお手入れ方法」を参照して、ジェルシートを清掃する。
電気刺激が弱い	レベル設定が低い。	+ボタンを押し、レベルを上げる。
	コイン電池の電池残量が少なくなっている。	新品のコイン電池に交換する。
	ジェルシートの粘着面(ジェル面)が傷んでいる。	P.9「ジェルシートの取り扱い方法」を参照して、新しいジェルシートに交換する。 ^{*2}
	ジェルシートの粘着面(ジェル面)がゴミやホコリなどで汚れている。	P.16「ジェルシートのお手入れ方法」を参照して、ジェルシートを清掃する。
電気刺激が強い	レベル設定が高い。	-ボタンを長押し(2秒)して、電源を切る。その後、再度電源を入れ、レベルを選ぶなおす。
	ジェルシートが肌に密着していない。	ジェルシートと肌の間に隙間がないように貼り付ける。
電気刺激が途中で止まる	コイン電池の電池残量がない。	新品のコイン電池に交換する。

故障かな?と思ったら

状態	考えられる原因	対処方法
ジェルシートが貼り付かない	粘着面(ジェル面)のフィルム(透明)を剥がしていない。	フィルム(透明)を剥がす。
	粘着面(ジェル面)が汚れている。	P.16「お手入れ方法」を参照して、お手入れする。
	粘着面(ジェル面)が傷んでいる。	P.9「ジェルシートの取り扱い方法」を参照して、新しいジェルシートに交換する。 ^{※2}
肌が赤くなる チクチクする	ジェルシートが肌に密着していない。	全てのジェルシートを肌に密着させる。 ^{※1}
	粘着面(ジェル面)が汚れたり、乾いたりしている。	P.16「お手入れ方法」を参照して、お手入れする。
	粘着面(ジェル面)が傷んでいる。	P.9「ジェルシートの取り扱い方法」を参照して、新しいジェルシートに交換する。 ^{※2}

※1 対処方法を実行しても、問題が解決しない場合は、電池カバーが浮いている可能性があります。カバーを両手の親指で押し戻し、浮きやすき間が無いことを確認してから使用してください。本体を身体や台紙から剥がすときは、両手で垂直方向にゆっくりと剥がしてください。

※2 ジェルシートは消耗品です。別売品をお求めください。詳しくは、P.22「別売品」を参照してください。

その他、異常がある場合はただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。

別売品

ジェルシートは消耗品です。粘着面(ジェル面)が傷んだときは、別売品をお求めください。
純正品以外のジェルシートを使用すると、以下のトラブルが発生するおそれがあります。

- ・製品本来の性能を発揮できない
- ・製品の一部が破損し、故障する
- ・刺激を強く感じたり、やけどや肌荒れを起こす

純正品以外を使用して発生したトラブルについては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。純正品のジェルシートのご購入に関しては、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。



Abs Fit

SIXPAD Abs Fit Gel Sheet



(シックスパッド専用 アブズフィット
高電導ジェルシート)



Body Fit

SIXPAD Body Fit Gel Sheet

(シックスパッド専用 ボディフィット
高電導ジェルシート)

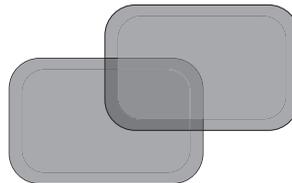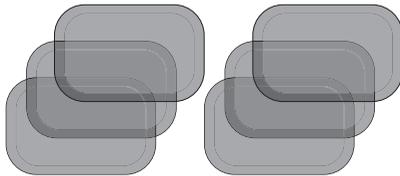

保証・アフターサービス

保証について

保証書は、この取扱説明書のP.25に記載されております。

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- ・保証期間中
お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。
お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。
- ・保証期間(1年間)が過ぎているとき
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます(付属品を除く)。
 - イ) 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - ロ) お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - ニ) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - ホ) 本書の提示がない場合
 - ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
 - チ) 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - リ) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷
 - ヌ) 純正品以外のジェルシートを使用した場合の故障及び損傷
3. 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。
4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。