

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



警告

誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。



注意

誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害*の発生が想定される」内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



注意を促す内容があることを告げるものです。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

警告



次のような方は使用しないでください。
事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

- 金属アレルギー体質の方
- 皮ふに知覚障害のある方
- 皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
- 妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体調がすぐれない方(妊娠高血圧症候群の方など)
- 出血性疾患(血友病など)の方
- 体調がすぐれない方
- 紫斑になりやすい方
- 薬を服用中の方
- 飲酒している方
- 疲労の激しい方



次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。
事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

- アレルギー体質の方
- 敏感肌の方
- 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 手術直後の方
- 医療用ステンレスやクリップを使用している方
- インプラントを使用している方
- その他医療機関で治療中の方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

警告



次のような部位には使用しないでください。
事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

- 傷口や目、口などの粘膜部位
- はれもの、にきび、化膿性疾患のある部位
- 過度の日焼けなど、肌に異常のある部位
- 当日、脱毛処理をした部位
- 整形手術をした部位
- 背骨など、骨が出っばっている部位
- 金属・プラスチック・シリコンなどが埋め込んである部位
- 指やのど、アキレス腱などの細い部位

本書で指定している部位以外には使用しないでください。



次のような行為は行わないでください。
事故やケガのおそれがあります。

- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くでの保管
- 分解、改造、修理
- 電子レンジや高圧容器に入れること
- 火気付近での使用

⚠️注意



- 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガにつながるおそれがあります。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。事故や故障のおそれがあります。
- 化粧水やクリームなどが手に付いた状態で使用しないでください。滑って本体が落下し、ケガをするおそれがあります。



- 本品を使用するときは、髪を束ねるか、ヘアバンドなどで固定してください。また、短い髪の場合もヘアピンなどで固定してください。巻き込んでケガをするおそれがあります。
- 本品を使用するときは、アクセサリー類(ネックレス、ピアスなど)を外してください。引っ掛かってケガをするおそれがあります。
- 使い始めは弱い力で使用し、力加減に注意して肌の様子を見ながら使用してください。無理な力を加えると、肌をいためたり、本品が破損したりするおそれがあります。弱い力で使用しても、十分に体感が得られます。
- 使用中または使用後に赤み、はれ、かゆみなどの異常があらわれたときは使用を中止し、医師に相談してください。心配な方は、本品の使用前に目立たないところでお試しいただき、異常が出ないことを確認してから使用してください。

使用上のご注意


以下の項目をよく読んでから使用してください。

ローラーが肌を吸い上げる強さは、フレキシブルハンドルを持つ角度で調整できます。

ローラーを前に進める場合

ハンドルを徐々に起こして、吸い上げの強さを確認してください。


肌に痛みを感じたら、ハンドルを寝かせてください。

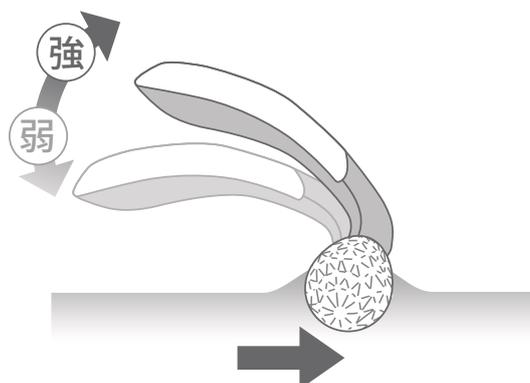

ローラーを後ろに引く場合

ハンドルを徐々に寝かせて、吸い上げの強さを確認してください。

肌に痛みを感じたら、ハンドルを起こしてください。

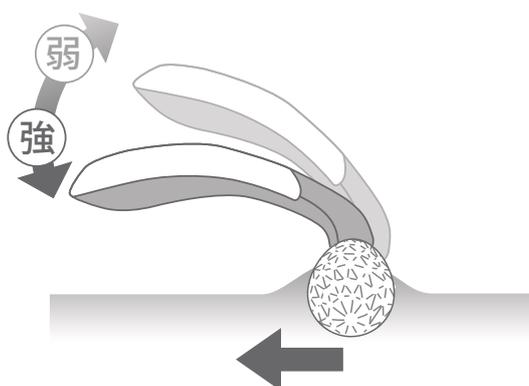

製品仕様

商品名	ReFa ACTIVE WF (リファアクティブダブルエフ)
品番	RF-AT2228B-N
サイズ	約105mm×171mm×61mm
材質	ABS、アクリル、ステンレス、ナイロン、シリコーンゴム、チタン
同梱品	本体、取扱説明書、保証書、ガイドブック、ポーチ、クリーンクロス
重量	約285g
防水性	JIS防水保護等級IPX7に準拠
原産国	日本(ポーチ、クリーンクロス:中国)

- 本品の性能向上のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本品は、日本国内にて、企画、開発、設計、最終組み立て、検査を行い、一部の部品調達及び、部品組み立てを海外の工場で行っています。
- 「ReFa」は、(株)MTGの登録商標です。