


使い方ガイド

Foot Fit 3 Compact



主電源スイッチ

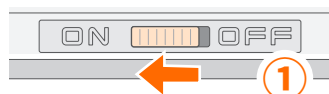

電源を入れる

- ① 主電源スイッチを ON (左)
→画面が点灯します。



電源ボタン




主電源スイッチが ON で、 画面が消えているとき

- 電源ボタンをタッチすると画面が点灯します。
- 主電源スイッチ ON のときはリモコンも使用できます。

スタンド

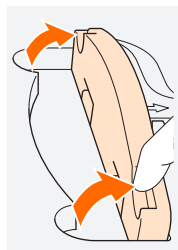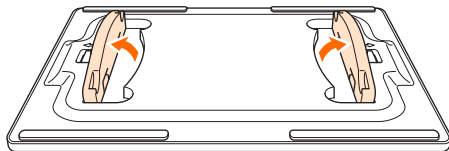

起こす

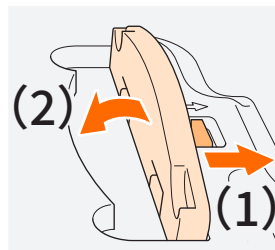



収納する

スタンドを起こす

指をひっかけて起こす

スタンドを収納する

ロックを外にスライドさせながら (1)、
スタンドを倒す (2)

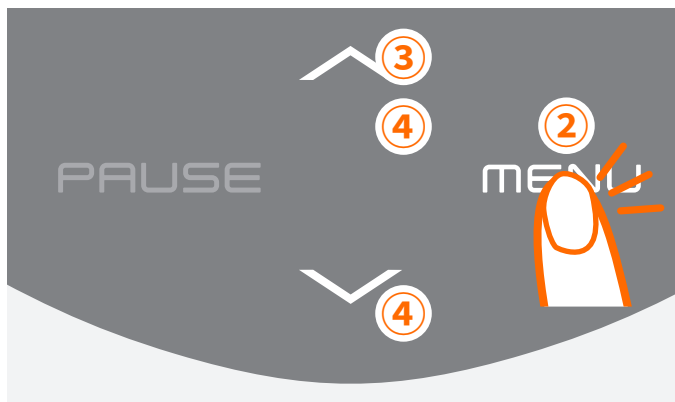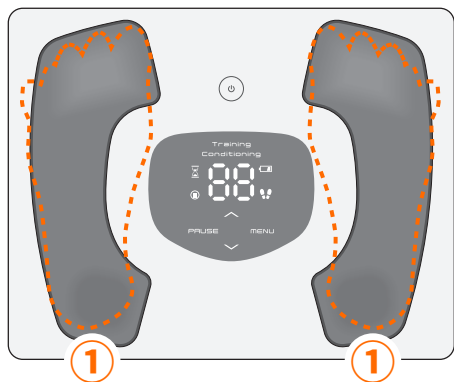

- ボタンは指でタッチして操作します。
- そのときに操作できるボタンが白く点灯します。

プログラムの始め方

- ① フットパッドに両足を置く
- ② プログラムを選ぶ → 「MENU」 をタッチ
- ③ プログラムを開始する → 「▲」 をタッチ
- ④ レベルを調節する → 「▲」「▼」 をタッチ